



Styletto IX

Uživatelská příručka



Made for

 iPhone | iPad | iPod

Obsah

Vítejte	4
Určené použití / Určený účel	5
Vaše naslouchadla	6
Typ sluchadla	6
Seznamte se se svými sluchadly	7
Součásti a názvy	8
Naslouchací programy	9
Vlastnosti	9
Každodenní použití	10
Nabíjení	10
Signalizace slabého nabití	10
Zapínání a vypínání naslouchadel	11
Přepnutí do pohotovostního režimu	12
Vkládání a vyjímání naslouchadel	13
Nastavení hlasitosti	18
Změna naslouchacího programu	19
Speciální poslechové situace	20
Telefonování	20
Bluetooth	21
Párování Bluetooth zařízení se sluchadly	21

Údržba a péče	22
Naslouchadla	22
Ušní koncovky	24
Profesionální údržba	25
Důležité bezpečnostní informace	26
Bezpečnostní informace týkající se lithiových dobíjitelných baterií	26
Další informace	29
Příslušenství	29
Podmínky pro provoz, přepravu a skladování	29
Informace týkající se likvidace	31
Vysvětlení symbolů	31
Odstraňování potíží se sluchadly	33
Specifické informace pro danou zemi	34
Servis a záruka	35

Vítejte

Děkujeme vám, že jste si vybrali naše sluchadla, aby vás doprovázela vaším každodenním životem. Podobně jako v případě čehokoli nového vám bude chvíli trvat, než se s nimi seznámíte.

Tato příručka spolu s asistencí vašeho foniatra vám pomůže objasnit výhody a vyšší kvalitu života, kterou vám sluchadla nabízejí.

Abyste z těchto sluchadel měli co největší užitek, doporučujeme je nosit každý den, po celý den. To vám pomůže si na ně zvyknout.



UPOZORNĚNÍ

Je důležité si důkladně a úplně přečíst tuto uživatelskou příručku a bezpečnostní pokyny. Dodržujte bezpečnostní pokyny, abyste předešli poškození nebo zranění.



Předtím, než svá naslouchadla poprvé použijete, zajistěte jejich plné nabití.



Zařízení nemusí vypadat přesně jako ilustrační nákresy v této příručce. Vyhrazuje si právo provádět jakékoli změny, které považujeme za nezbytné.

Určené použití / Určený účel

Sluchadla jsou určena pro zlepšení slyšení u osob, které mají tento smysl poškozen. Stanovení diagnózy a předepsání sluchadla musí být prováděno specialisty zaměřenými na zdravotní problematiku sluchu, jako jsou lékaři ORL nebo foniatři.

Sluchadla a jejich příslušenství používejte jedině způsobem, který je popsán v příslušných uživatelských příručkách.

Vaše naslouchadla



Tato uživatelská příručka popisuje volitelné funkce, jimiž mohou, ale nemusejí být vaše sluchadla vybavena.

Obrátte se na svého foniatra, aby vám sdělil funkce, které platí pro vaše sluchadla.

Typ sluchadla

Vaše sluchadla jsou typu RIC (Receiver-in-Canal). Přijímač je umístěn v ušním kanálu a připojen ke sluchadlu pomocí kabelu přijímače. Tato sluchadla nejsou určena pro děti mladší než 3 roky nebo pro osoby, jejichž vývojový věk nedosahuje 3 let.

Vaše sluchadla jsou vybavena technologií Bluetooth® Low Energy* Technologie umožňující snadnou výměnu dat s vaším chytrým telefonem a bezproblémový streaming audiosignálu s vaším přístrojem iPhone** a některými chytrými telefony se systémem Android, které podporují streamování audiosignálu do sluchadel (ASHA).

* Vlastníkem slovní značky a loga Bluetooth je firma Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností WS Audiology Denmark A/S spadá pod licenční ujednání. Ostatní obchodní známky a obchodní názvy jsou ve vlastnictví příslušných společností.

** iPad, iPhone a iPod touch jsou obchodní známky společnosti Apple Inc., které jsou registrovány v USA a v jiných zemích.

Napájecí článek (lithiová dobíjecí baterie) je natrvalo zabudován do sluchadla. To umožňuje snadné nabíjení pomocí nabíječky Styletto IX Charger nebo D&C Charger slimRIC.


Funkce bezdrátové komunikace umožňuje využívat pokročilé audiologické funkce a synchronizaci mezi vašimi naslouchadly.

Seznamte se se svými sluchadly

Vaše sluchadla nemají žádné ovládací prvky.

Jestliže si přejete manuálně nastavovat hlasitost nebo přepínat naslouchací programy, můžete požádat svého foniatra, aby Vám zajistil dálkové ovládání (volitelný doplněk).

Součásti a názvy

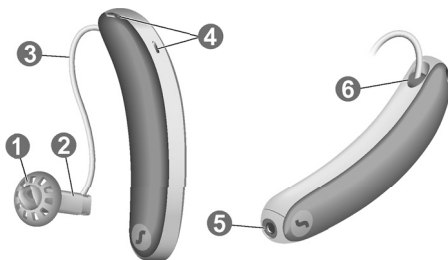

- | | |
|-------------------|--|
| ❶ Ušní koncovka | ❹ Otvory mikrofonu |
| ❷ Přijímač | ❺ Nabíjecí kontakt |
| ❸ Kabel přijímače | ❻ Označení strany
(červená = pravá, modrá = levá) |

Můžete používat následující standardní ušní koncovky:

Standardní ušní koncovky		Velikost
☐		Sleeve 3.0 Vented/Closed/ Power
☐		Eartip 3.0 Open
☐		Eartip 3.0 Tulip

Standardní ušní koncovky můžete snadno vyměnit. Další informace si přečtete v kapitole „Údržba a péče“.

Naslouchací programy

1

2

3

4

5

6

Další informace si přečtěte v kapitole „Změna naslouchacího programu“.


Vlastnosti

- ☐ **Zpoždění při zapínání** vám umožňuje si nasazovat sluchadla, aniž by pískala.
Další informace si přečtěte v kapitole „Zapínání a vypínání“.
- ☐ **Terapeutická funkce Tinnitus** (potlačení hučení) generuje zvuk, abyste byli odvedeni od vašich hučivých zvuků.

Každodenní použití

Nabíjení

Máte na výběr mezi Styletto IX Charger **1** a D&C Charger slimRIC **2**.

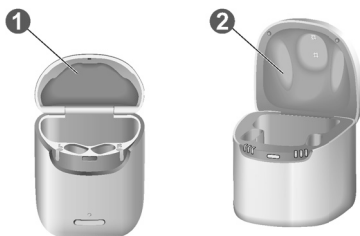

- Umístěte sluchadla do nabíječky.
- Dodržujte pokyny uvedené v uživatelské příručce pro nabíječku. Užitečné rady týkající se nabíjení můžete najít také v uživatelské příručce pro nabíječku.

Signalizace slabého nabití

Abyste se dozvěděli, že napájecí článek je téměř vybitý, uslyšíte výstražný signál. Tento signál se bude opakovat každých 15 až 30 minut podle nastavení. V závislosti na způsobu používání vašich sluchadel máte přibližně ještě asi 1,5 hodiny, abyste svá sluchadla nabili, než přestanou pracovat. Krátce předtím, než sluchadla přestanou fungovat, se výstražný signál opakuje každých 1 až 7 minut v závislosti na vašem nastavení.

Mějte na vědomí, že životnost napájecího článku se sníží, pokud je současně používáno příliš mnoho funkcí.

Zapínání a vypínání naslouchadel

Máte následující možnosti, jak můžete naslouchadla zapnout nebo vypnout.

- ▶ **Zapínání:** Sluchadla vyjměte z nabíječky.

Ve sluchadlech se přehraje úvodní melodie. Nastaví se **předdefinovaná** hlasitost a naslouchací program.

- ▶ **Vypínání:** Umístěte sluchadla do nabíječky.

Mějte na paměti, že nabíječka musí být zapnutá.

Je-li aktivována funkce zpoždění při zapínání, sluchadla se zapnou až poté, co uplyne prodleva v délce několika sekund. Během této doby si můžete sluchadla vložit do uší, aniž byste slyšeli nepříjemné pískání způsobené zpětnou vazbou.

Funkci „zpoždění při zapínání“ vám může nakonfigurovat váš foniatr.

Přepnutí do pohotovostního režimu

Pomocí dálkového ovládání můžete svá naslouchadla přepnout do pohotovostního režimu. Naslouchadla se tím ztlumí. Když pohotovostní režim opustíte, obnoví se **předtím** použité nastavení hlasitosti a naslouchacího programu.

Poznámka:

- V pohotovostním režimu **nejsou** naslouchadla vypnuta úplně. Spotřebovávají určitou energii.

Z tohoto důvodu doporučujeme používat pohotovostní režim jen po krátkou dobu.

- Pokud si přejete opustit pohotovostní režim, ale dálkové ovládání nemáte po ruce: Vypněte svá naslouchadla a znovu je zapněte (na krátkou dobu je umístěte do nabíječky, dokud se nerozsvítí jedna nebo více kontrolky). Vyčkejte, až se ve vašich naslouchadel ozve úvodní melodie. To může trvat i několik sekund. Všimněte si, že jsou nastaveny **předdefinovaná** hlasitost a naslouchací program.

Vkládání a vyjímání naslouchadel

Vaše sluchadla jsou precizně vyladěna pro vaše pravé a levé ucho. Strany se rozlišují barevnými značkami:


- červená značka = pravé ucho
- modrá značka = levé ucho




Vkládání sluchadla:

- V případě zařízení Sleeves dávejte pozor, aby se ohyb jednotky Sleeve shodoval s ohybem kabelu přijímače.

Správně:

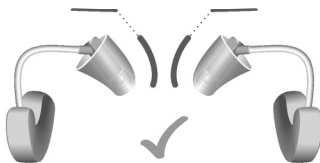


Nesprávně:

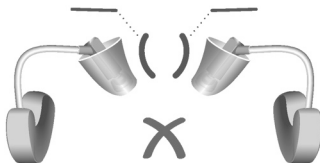

- Podržte kabel přijímače za jeho ohnutou část v blízkosti ušní koncovky.
- Opatrně zasuněte ušní koncovku do ušního kanálu ❶.
- Mírně je pootočte, aby bylo dobře usazeno.

Otevřete a zavřete ústa, abyste zabránili nahromadění vzduchu v ušním kanálu.

- Sluchadlo zvedněte a přetáhněte jej přes horní okraj svého ucha ❷.

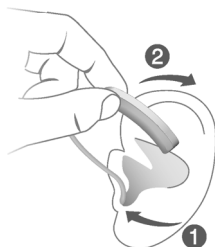

i

- Může být pohodlné vkládat **pravé** sluchadlo do ucha **pravou** rukou a **levé** sluchadlo **levou** rukou.
- Pokud máte při zasouvání ušní koncovky problémy, pomocí druhé ruky jemně stáhněte ušní boltec směrem dolů. Tím se ušní kanál otevře a zasunutí ušní koncovky bude snazší.

Volitelná opěrná strunka pomáhá bezpečně udržet ušní koncovku v uchu. Připojení volitelného upevňovacího prvku:

Concha Lock Sleeve 3.0

- Nastavte polohu Concha Lock Sleeve 3.0 a přijímače způsobem uvedeným na obrázku. Následně nasuňte Concha Lock Sleeve 3.0 na přijímač, tak aby bezpečně sedělo.



Concha Lock 3.0

- Zarovnejte konec upevňovacího prvku s plochým koncem přijímače.



- Poté upevňovací prvek zatlačte do přijímače, dokud nezacvakne na místo.




Pokud chcete vložit opěrnou strunku na příslušné místo, postupujte následujícím způsobem:

- Ohněte opěrnou strunku a umístěte ji opatrně do spodní části svého ucha (viz obrázek).



Vyjímání sluchadla:

- Sluchadlo zvedněte a přetáhněte jej přes horní okraj svého ucha ❶.

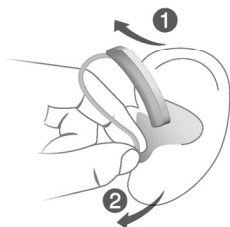

- Dvěma prsty uchopte přijímač v ušním kanálu a opatrně jej vytáhněte ❷.

Netahejte za kabel přijímače.

Po použití sluchadel je vyčistěte a vysušte. Další informace si přečtete v kapitole „Údržba a péče“.

Nastavení hlasitosti

Vaše naslouchadla automaticky nastavují hlasitost podle situace při poslechu.

- Pokud upřednostňujete manuální nastavování hlasitosti, použijte dálkové ovládání (volitelný doplněk).

Na změnu hlasitosti můžete být upozorněni akustickým signálem (volitelné).

Změna naslouchacího programu

V závislosti na akustické situaci naslouchadla automaticky nastavují svůj výstup.

Vaše naslouchadla mohou mít také několik naslouchacích programů, které vám umožňují podle potřeby změnit parametry zvuku. Na změnu programu můžete být upozorněni tónovým signálem (volitelné).

- Pokud si přejete manuálně změnit naslouchací program, použijte dálkové ovládání (volitelný doplněk).

Nahlédněte do kapitoly „Naslouchací programy“, kde naleznete seznam svých naslouchacích programů.

Je použito předdefinované nastavení hlasitosti.

Speciální poslechové situace

Telefonování

Pokud telefonujete, držte telefonní přijímač mírně nad svým uchem. Naslouchadlo a telefonní přijímač musí být proti sobě. Přijímač mírně pootočte, aby ucho nebylo zcela zakryto.



Program pro telefonování

Může se stát, že při používání telefonu upřednostňujete určitou hlasitost. Požádejte svého foniatra, aby v konfiguraci nastavil program pro telefonování.

- Kdykoli telefonujete, přepněte na program pro telefonování.

Pokud je program pro telefonování nastaven v konfiguraci Vašich sluchadel, je to uvedeno v kapitole „Naslouchací programy“.

Bluetooth

Sluchadla lze propojit s kompatibilními Bluetooth® zařízeními, jako jsou telefony, tablety a počítače. Díky tomu můžete sluchadla používat pro telefonní hovory, poslech podcastů a hudby atd.

V situacích, jako je cestování v letadle, může být používání Bluetooth zařízení zakázáno. V takovém případě lze funkci sluchadla Bluetooth vypnout v aplikaci chytrého telefonu.

Párování Bluetooth zařízení se sluchadly

Bluetooth Postup párování závisí na vašem Bluetooth zařízení. Další informace naleznete v návodu k použití vašeho zařízení.



- Po zapnutí sluchadel musíte do 3 minut dokončit párování. Pokud párování trvá déle než 3 minuty, jednoduše sluchadla vypněte, počkejte 2 sekundy a znovu je zapněte. Nyní znovu spusťte postup párování ve vašem Bluetooth zařízení.

Údržba a péče

Aby se zabránilo poškození, je důležité o naslouchadla pečovat a dodržovat několik základních pravidel, která se brzy stanou běžnými činnostmi, které provádíte každý den.

Naslouchadla

Čištění

Vaše sluchadla mají ochranný povlak. Pokud však nejsou sluchadla pravidelně čištěna, mohou se poškodit nebo způsobit poškození zdraví uživatele.

- ▶ Každý den sluchadla očistěte měkkým suchým hadříkem.
- ▶ Zařízení nikdy nemyjte pod tekoucí vodou a nikdy je neponořujte do vody.
- ▶ Při čištění zařízení nevystavujte tlaku.
- ▶ K čištění nabíjecích kontaktů nepoužívejte rozpouštědlo na bázi alkoholu.
- ▶ Abyste zabránili korozi, otřete z nabíjecích kontaktů nebo sluchadel měkkým a suchým hadříkem pot nebo tekutinu, teprve poté je vložte do nabíječky.
- ▶ Požádejte svého foniatra o doporučené čisticí prostředky, speciální soupravu pro ošetřování nebo o další informace o tom, jak udržet svá sluchadla v dobrém stavu.



Sušení

K vysoušení sluchadel používejte běžné produkty nebo D&C Charger slimRIC. Informace o doporučovaných produktech k vysoušení a individuální pokyny, kdy máte svá sluchadla sušit, získáte u svého foniatra.

Skladování

- Krátkodobé skladování (do několika dnů): Svá sluchadla vypněte tím, že je uložíte do nabíječky.

Nabíječka musí být zapnutá. Pokud nabíječka zapnutá není, sluchadla se po vložení do nabíječky **nevypnou**.

Pamatujte, že pokud sluchadla vypnete prostřednictvím dálkového ovládání nebo aplikace pro chytrý telefon, sluchadla **nejsou** vypnutá zcela. Přepnou se do pohotovostního režimu, ve kterém stále spotřebovávají energii.

- Dlouhodobé skladování (týdny, měsíce...): Napřed svá sluchadla plně nabijte. Ponechte je v nabíječce Styletto IX Charger se zavřeným víkem. Jakmile jsou sluchadla plně nabitá, nabíječka i sluchadla přejdou do stavu hibernace, který je energeticky úsporný.

Při skladování sluchadel doporučujeme používat vysoušecí prostředky.

Sluchadla je třeba každých 6 měsíců nabít, aby se zabránilo nenávratnému hlubokému vybití napájecích článků. Napájecí článek, u něhož došlo k hlubokému vybití, již není možné znovu nabít a musí být vyměněn. Opakované nabíjení doporučujeme častěji než jednou za 6 měsíců.

Dodržujte podmínky pro skladování uvedené v kapitole „Podmínky pro provoz, přepravu a skladování“.

Ušní koncovky


Čištění

Cerumen (ušní maz) se může akumulovat na ušních koncovkách. To může mít nepříznivý vliv na kvalitu zvuku. Každý den ušní koncovky vyčistěte.

Pro všechny typy ušních koncovek:

- Bezprostředně po vyjmutí očistěte ušní koncovku měkkou a suchou utěrkou.

Tím zabráníte zaschnutí a ztvrdnutí ušního mazu.

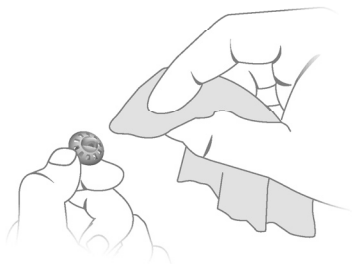


Výměna

Standardní ušní koncovky vyměňujte přibližně jednou za tři měsíce. Pokud zpozorujete praskliny nebo jiné změny, vyměňte je dříve. Postup při výměně standardní ušní koncovky závisí na jejím typu. V kapitole „Součásti a názvy“ váš foniatr typ ušní koncovky vyznačil.

- Chcete-li sundat starou ušní koncovku nebo Sleeve, postupujte podle níže uvedeného nákresu. Netahejte za kabel přijímače.



- Dbejte zvláště na to, aby nová ušní koncovka nebo Sleeve zcela překrývaly upevňovací kroužky na přijímači.
- Zkontrolujte, zda jsou nová ušní koncovka nebo Sleeve dobře upevněny.

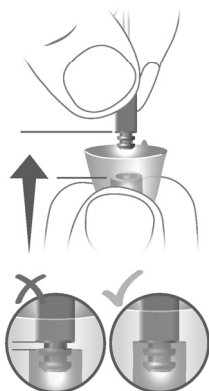

Profesionální údržba

Důkladné profesionální čištění a údržbu může uskutečnit váš foniatr.

Požádejte svého foniatra, aby vám poskytl individuální doporučení týkající se intervalů údržby a podpory.

Důležité bezpečnostní informace

Bezpečnostní informace týkající se lithiových dobíjitelných baterií



VÝSTRAHA

Lithiová dobíjitelná baterie je natrvalo zabudována do vašeho přístroje. Nesprávné použití přístroje může mít za následek, že lithiová dobíjitelná baterie vybuchne.

Nebezpečí úrazu, požáru nebo výbuchu!

- Dodržujte bezpečnostní pokyny pro lithiovou dobíjitelnou baterii uvedené v této kapitole.



VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Nabíječku připojujte výhradně pomocí napájecího kabelu s USB, který vyhovuje požadavkům norem IEC 60950-1 a/nebo IEC 62368-1.



VÝSTRAHA

- ▶ Dodržujte provozní podmínky.
- ▶ Věnujte zvláštní pozornost ochraně svého zařízení před extrémním teplem (např. oheň, mikrovlnná trouba, indukční trouba nebo jiná indukční pole o vysoké intenzitě) a přímým slunečním zářením.
- ▶ Pro nabíjení naslouchadel používejte jedinečně schválenou nabíječku. Obratě se s prosbou o pomoc na svého foniatra.
- ▶ Zařízení nerozebírejte.
- ▶ Zařízení nepoužívejte v atmosférách, kde hrozí nebezpečí výbuchu.
- ▶ Pokud je zařízení zdeformované nebo zjevně poškozené, nepoužívejte je.
- ▶ Jestliže je výkon zařízení po nabití výrazně snížený, nepoužívejte jej. Vraťte zařízení svému foniatrovi.
- ▶ Nelikvidujte zařízení v ohni nebo ve vodě.



VÝSTRAHA

Výměnu a opravy smí provádět jedině odborníci.
Z tohoto důvodu:

- ▶ Neopravujte a ani nevyměňujte lithiovou dobíjitelnou baterii sami.
- ▶ Kvůli velmi nepravděpodobné možnosti prasknutí nebo výbuchu uchovávejte lithiové dobíjitelné baterie mimo jakékoli hořlavé materiály.

Nastane-li kterýkoli z výše uvedených případů, vraťte své zařízení foniatrovi.

Pokud budete potřebovat další bezpečnostní informace, nahlédněte do příručky věnované bezpečnosti, která je dodávána spolu s vašimi sluchadly.

Další informace

Příslušenství

Typ dostupného příslušenství závisí na typu příslušného sluchadla. Například dálkové ovládání, zvukové streamovací zařízení nebo aplikace pro chytré telefony pro dálkové ovládání.

Potřebujete-li další informace, obraťte se na svého foniatra.

Podmínky pro provoz, přepravu a skladování

Zařízení funguje v rámci následujících podmínek v okolním prostředí (platí také v době mezi jednotlivými použitími):

Provozní podmínky	Vybíjení	Nabíjení
Teplota	0–50 °C	10–35 °C
	32–122 °F	50–95 °F
Relativní vlhkost	5–93 %	20–75 %
Atmosférický tlak	700–1060 hPa	700–1060 hPa

V případě déletrvajících časových intervalů pro přepravu a skladování dodržujte prosím následující podmínky:

	Skladování	Přeprava
Teplota (doporučená)	10–25 °C 50–77 °F	-20–60 °C -4–140 °F
Teplota (maximální rozsah)	10–40 °C 50–104 °F	-20–60 °C -4–140 °F
Relativní vlhkost (doporučená)	20–80 %	5–90 %
Relativní vlhkost (maximální rozsah)	10–80 %	5–90 %
Atmosférický tlak	700–1060 hPa	700–1060 hPa

Mějte na paměti, že zařízení se musí minimálně každých 6 měsíců nabít. Doporučujeme nabíjet zařízení každé 3 měsíce. Další podrobnosti najdete v oddílu „Údržba a péče“.

Na jiné součásti, jako je nabíječka, se mohou vztahovat jiné podmínky.



VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu, požáru nebo výbuchu během přepravy.

- Lithiové baterie a naslouchadla zasílejte v souladu s místními předpisy.

Informace týkající se likvidace

- ▶ Abyste zabránili znečištění životního prostředí, neodhazujte napájecí články ani sluchadla do komunálního odpadu.
- ▶ Napájecí články a sluchadla recyklujte nebo likvidujte v souladu s místními předpisy.

Vysvětlení symbolů

Symbole použité v uživatelských příručkách



Označuje situaci, která by mohla mít za následek vážná, střední nebo lehká zranění.



Upozorňuje na hrozící hmotné škody.



Rady a tipy, jak se zařízením zacházet co možno nejlépe.



Často kladená otázka.



Štítek o shodě s CE potvrzuje shodu s určitými evropskými směrnici, viz kapitolu „Informace o shodě“.



Označení výrobce přístroje z hlediska právních norem.

Made for

iPhone | iPad | iPod

Označení „Made for iPhone“, „Made for iPad“ a „Made for iPod“ znamenají, že toto elektronické příslušenství bylo navrženo speciálně pro připojení k iPhone, iPadu, nebo iPodu a že firma, která je vyvinula, prohlašuje, že splňuje výkonové normy firmy Apple. Firma Apple neodpovídá za provoz tohoto zařízení a ani za to, že splňuje bezpečnostní normy a úřední nařízení. Mějte prosím na paměti, že použití tohoto příslušenství s jednotkami iPhone, iPad nebo iPod může mít nepříznivý vliv na výkon bezdrátové komunikace.

Odstraňování potíží se sluchadly

Problém a možná řešení

Zvuk je slabý.

- Zvyšte hlasitost.
 - Nabijte sluchadlo.
 - Vyčistěte nebo vyměňte ušní koncovku.
-

Sluchadlo vydává pískavé zvuky.

- Znovu zasuněte ušní koncovku, aby bezpečně zapadla na své místo.
 - Snižte hlasitost.
 - Vyčistěte nebo vyměňte ušní koncovku.
-

Zvuk je zkreslený.

- Snižte hlasitost.
 - Nabijte sluchadlo.
 - Vyčistěte nebo vyměňte ušní koncovku.
-

Sluchadlo vydává tónové signály.

- Nabijte sluchadlo.
-

Sluchadlo nefunguje.

- Zapněte sluchadlo.
 - Nabijte sluchadlo. Věnujte rovněž pozornost stavovým kontrolkám LED na nabíječce.
-

Pokud se budete potýkat s jakýmkoli dalšími problémy, obraťte se na svého foniatra.

Specifické informace pro danou zemi

USA a Kanada

Informace o certifikaci pro naslouchadla s funkcí pro bezdrátovou komunikaci:

Styletto IX:

- HVIN: RFM004
- Obsahuje FCC ID: 2AXDT-RFM004
- Obsahuje IC ID: 26428-RFM004

Servis a záruka

Výrobní čísla

sluchadlo

**Jednotka
přijímače**

Vlevo:

Vpravo:

Data servisních úkonů

1:

4:

2:

5:

3:

6:

Záruka

Datum zakoupení:

Záruční doba v měsících:

Váš foniatr



Výrobce z hlediska právních norem

WSAUD A/S

Nymøllevej 6

3540 Lyngø

Dánsko

Distributor

Sivantos s.r.o.

Molákova 576/11

186 00 Praha 8 - Karlín

Tel.: +420 257 328 161

Email: sluchadla.cz@signia-pro.com

Dokument č. 05575-99T01-2D00 CS

Položka objednávky č. 210 354 11

Poslední revize 01.11.2023

www.wsaud.com

© 02.2024, WSAUD A/S.

Všechna práva vyhrazena

www.signia.net

